


790176 PLACARD BAS EN GRÈS SANS CUVE 150X75X90cm PORTES BATTANTES



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides

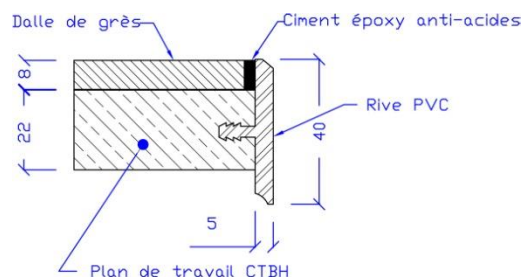

Caisson

Détail en coupe du plateau

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes battantes
- Séparation médiane
- 2 Etagères réglables
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 6 vérins de mise à niveau
- serrure

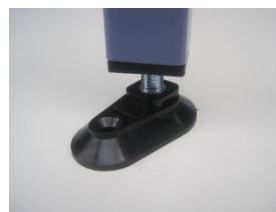

Vérin de mise à niveau