

790472 PAILLASSE PMR AVEC CUVE


REVETEMENT GRES
REGLAGE MECANIQUE PAR MANIVELLE AMOVIBLE
120x60x(réglable de 77 à 92cm)



Paillasse adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite

Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- Cuve PMR 30x30x8,5cm

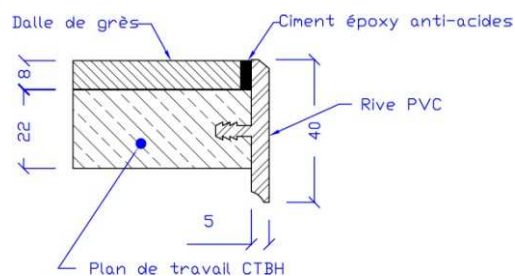

Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en H, section de tube 30x30x2mm
- Caisson de protection des fluides avec batteuse avant
- 4 Vérins hydrauliques
- Manivelle amovible
- Bandeau arrière en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 5014
- 4 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau