




Fiche produit

Captair 632B Smart & Midcap


Armoire ventilée à filtration sans raccordement



Option 1 : Armoire basse / portes coulissantes

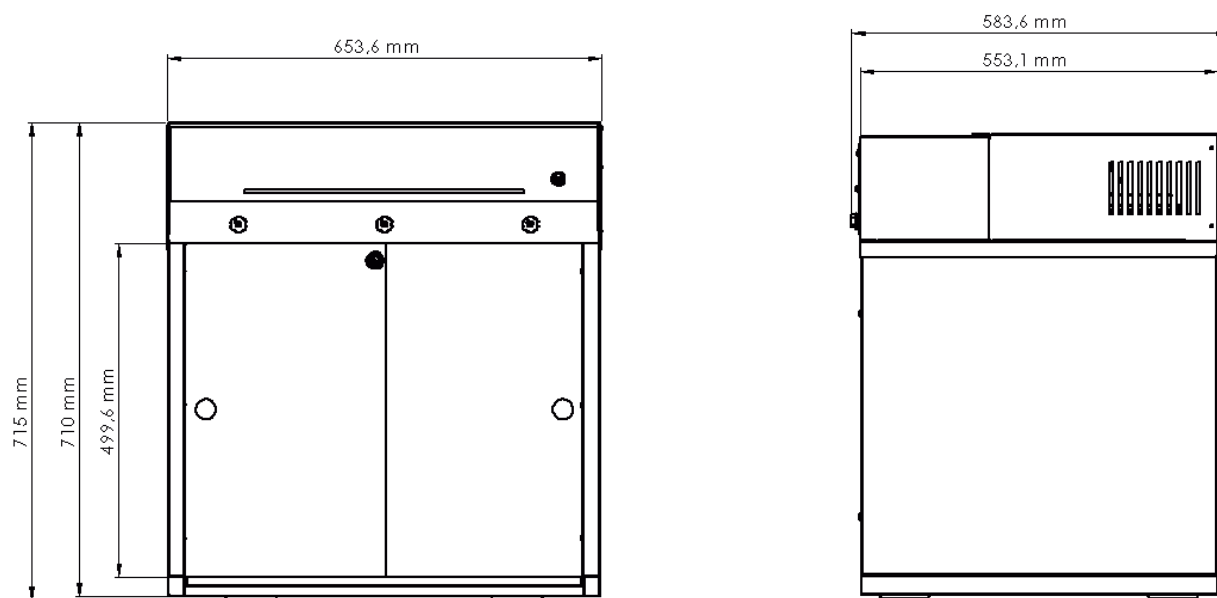

Option 2 : Armoire basse / portes tiroir extractible

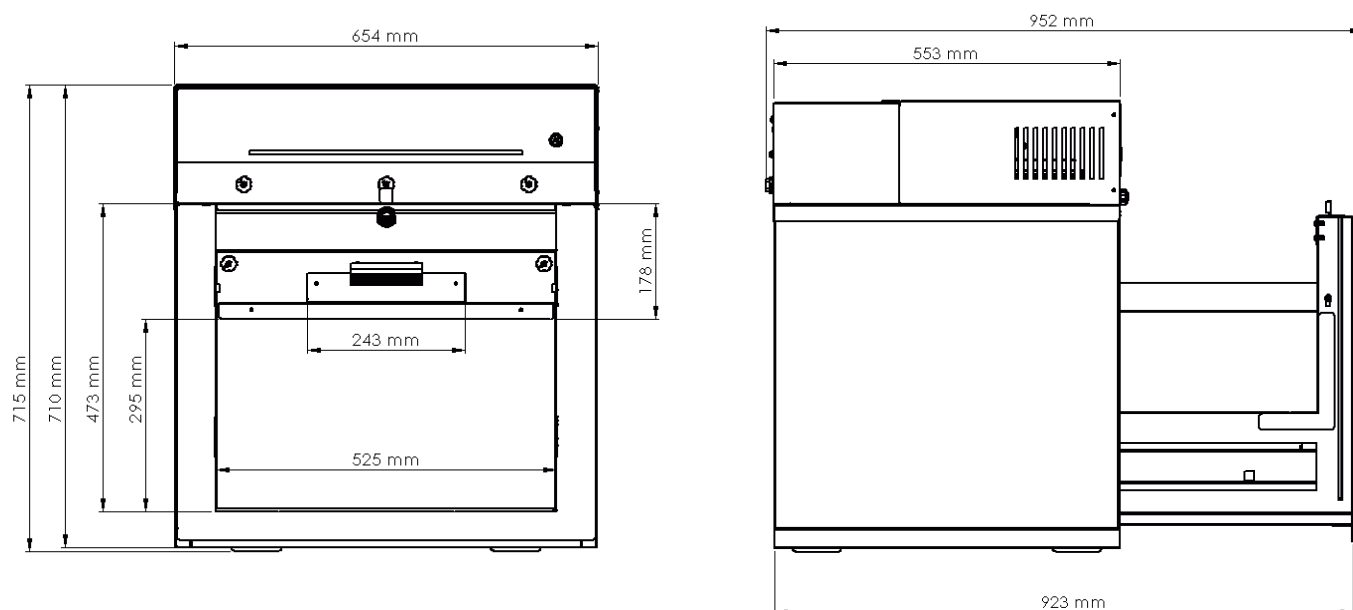

Spécifications techniques

Conformité aux normes	Performances de filtration testées selon les conditions de la norme AFNOR NF X 15-211:2009 : France EN 1822 : 1998 (Filtre HEPA H13) - Marquage CE
Débit d'air	11 m³/h
Tension/Fréquence	110-230 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	20 W
Structure	Acier électro-zingué anti-corrosion gainé par enrobage de polymère thermo-durcissable anti-acides
Portes	PMMA transparent et incolore à grande pureté optique. Inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs
Modules de filtration	Polypropylène injecté

Equipements

Interface de communication*	Communication simple par pulsations lumineuses et sonores : paramètres de ventilation, décompte du temps de fonctionnement de l'appareil, alarme ouverture de porte, alarme de défaut de ventilation
Filtration carbone pour gaz et vapeurs	AS : Pour vapeurs organiques - BE : pour vapeurs acides F : Pour vapeurs de formaldéhyde - K : Pour vapeurs d'ammoniaque
Filtration particulaire pour poudres**	Filtre HEPA H13 : 99,95 % d'efficacité pour les particules de diamètre supérieur ou égal à 0,1 µm
eGuard*	Interface pour le contrôle à distance en temps réel des paramètres de sécurité - compatible PC
Capteurs de porte*	Déclenchement d'alarme en cas d'ouverture de porte prolongée

* Non disponible sur Captair 632B Midcap

** En option

Configurations de rangement

	Option 1 : Portes coulissantes	Option 2 : Tiroir extractible
Capacités de rangement*	Environ 44 flacons de 1L	Environ 25 flacons de 1L (bac) Environ 35 flacons de 100 ml (étagère) Environ 70 flacons de 50 ml (étagère)
Compartiments de rangement	2	1
Fournie avec	2 bacs + 2 étagères	1 bac + 1 étagère coulissante
Tapis absorbants	4	2
Fermeture	Serrure à clé	

* Les quantités peuvent varier selon le type de contenant utilisé

Options

Molécule*	Détection automatique de défaut de filtration : Type S, pour solvants ou Type A, pour acides ou Type F, pour formaldéhyde
------------------	---

* Non disponible sur Captair 632B Midcap