

# 790132 PLACARD BAS EN GRÈS 1800X600 HUMIDE




Avec double cuve ref: 790067



## Plateau

Avec cuve 60x45 ref: 790043


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Vendu sans cuve**, possibilité de choisir le type de cuve de la collection.

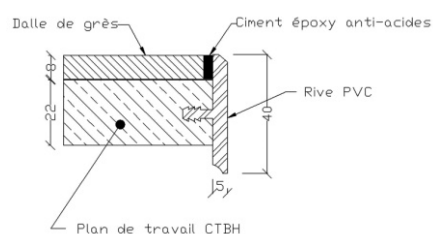

## Caisson

Détail en coupe du plateau

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes coulissantes par glissières sur l'avant
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 4 vérins de mise à niveau

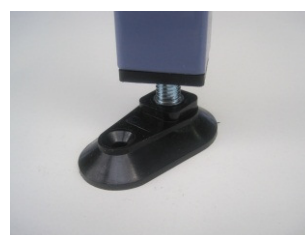

Vérin de mise à niveau