



790143 PLACARD BAS EN GRÈS SANS CUVE

180x75x90cm

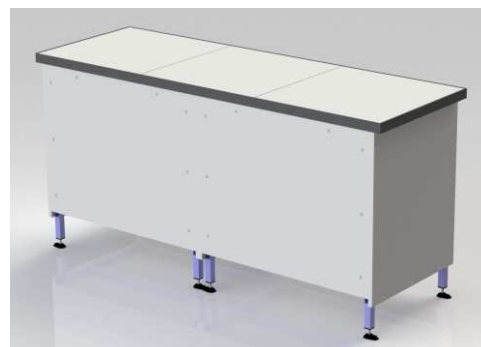

Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides

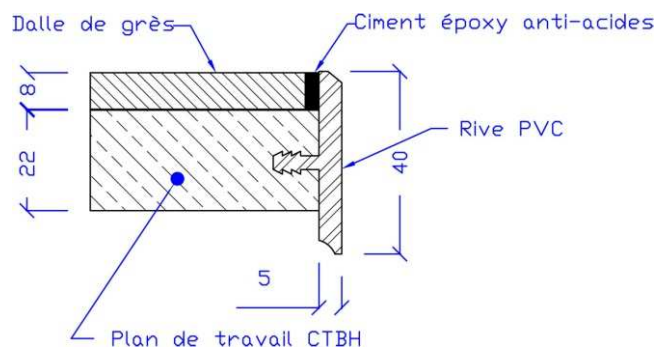

Détail en coupe du plateau

Caisson

- Placard de rangement constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Portes coulissantes par glissières sur l'avant
- Poignées cuvettes en PVC blanc
- 8 vérins de mise à niveau
- Serrures



Vérin de mise à niveau