


790365 PLOT HUMIDE PMR REVETEMENT GRES

60x60 deux positions 80 ou 90cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Cuve polypropylène 30x30x10 cm**

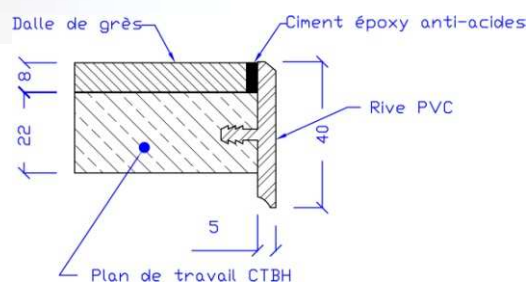

Détail en coupe du plateau

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc,
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- 5 vérins de mise à niveau
- Face avant décaissée pour accès facilité
- **Possibilité de mettre en option un chandelier à commande déportée en face avant pour accès simplifié Réf 790327**

