


790377 PAILLASSE TRIANGULAIRE

Avec Placard de rangement portes coulissantes
Revêtement grès émaillé 120x120x170cm



Plateau

- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides

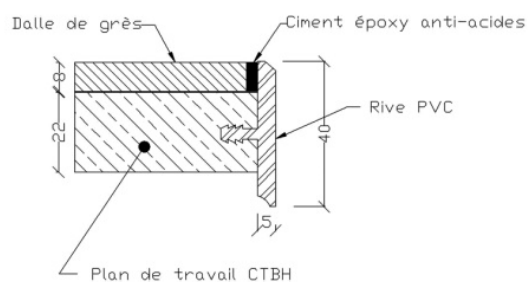

Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement section de tube 30x30x2mm
- Traverse métallique
- Placard en panneau aggloméré de 19mm
- Montage tourillonné
- Traverse centrale
- Espace de rangement dans le meuble accessible par deux portes coulissantes fermant à clé pass.
- Peinture époxy RAL 5014
- 3 vérins de mise à niveau



Vérin de mise à niveau