


790416 PLOT HUMIDE REVETEMENT GRES EMAILLE

80x75x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de grès émaillé Keraïon de type Buchtall épaisseur 8mm
- Joints ciment époxy antiacides
- **Cuve en grès 60x45x30 cm**

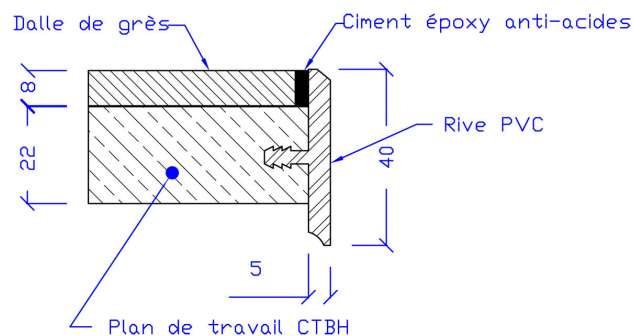

Détail en coupe du plateau

Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'avant par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau

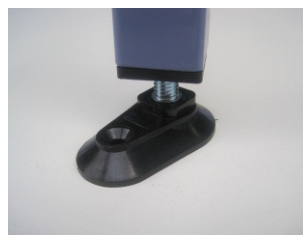

Vérin de mise à niveau