


# 790562 PLOT HUMIDE REVETEMENT TRESPA

## 45x75x90cm



### Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalles de Trespa (Résine phénolique) épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides
- **Cuve 30x30 en polypropylène**

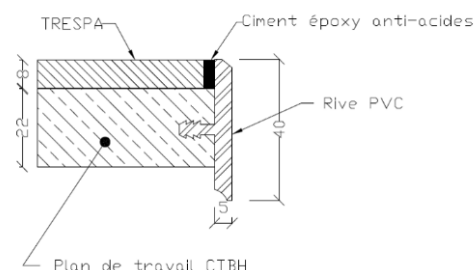

*Détail en coupe du plateau*

### Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau

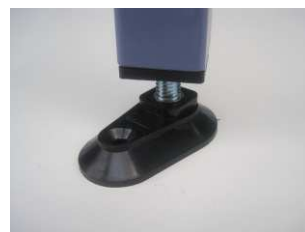

*Vérin de mise à niveau*