


790566 PLOT HUMIDE REVETEMENT TRESPA 60x60x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalles de Trespa (Résine phénolique) épaisseur 8mm
- Joints époxy antiacides
- **Cuve 32x32 en grès**

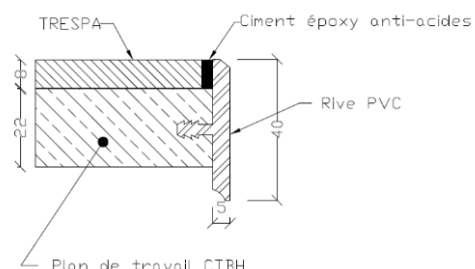

Caisson

Détail en coupe du plateau

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'arrière par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau

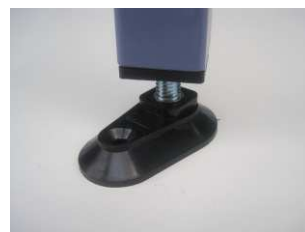

Vérin de mise à niveau