


# 790616 PLOT HUMIDE REVETEMENT VERRE

## 80x75x90cm



### Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC extrudé
- Dalle de VERRE Emalit Sécurit épaisseur 8mm
- Joints silicone anti fongiques
- Cuve Polypropylène 60x45x30 cm

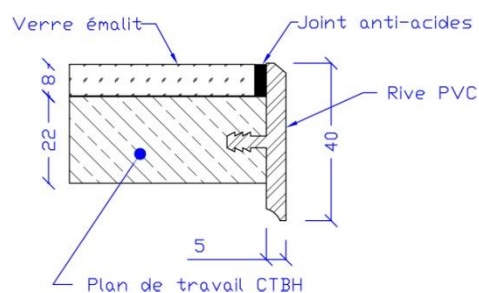

Détail en coupe du plateau

### Caisson

- Protection des fluides par caisson constitué de panneaux agglomérés 19mm mélaminé 2 faces couleur blanc
- Montage tourillonné
- Trappe d'accès à l'avant par batteuse fermeture clé carré
- 4 vérins de mise à niveau

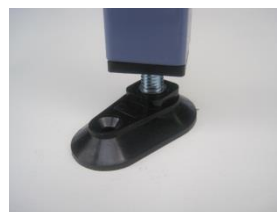

Vérin de mise à niveau