


790966 PAILLASSE en C Revêtement VERRE 150x60x90cm



Plateau


- Plateau mélaminé 22 mm CTBH
- Bande de rive antichoc PVC blanche extrudé 5mm
- Verre Emalit épaisseur 8mm
- Joints silicone antifongique

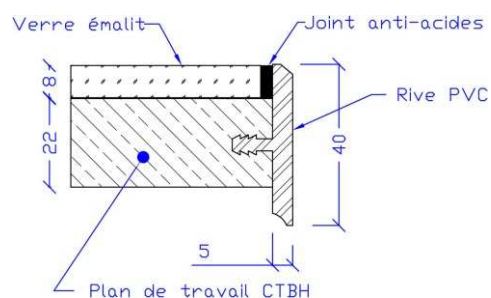

Détail en coupe du plateau

Structure

- Piétement en C, section de tube 60x40x2mm
- Ceinture avant et coté en panneau aggloméré 19mm
- Peinture époxy RAL 9003
- 4 vérins de mise à niveau

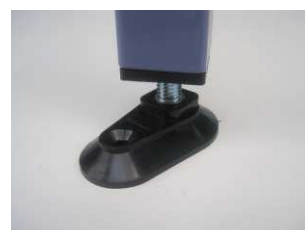

Vérin de mise à niveau