

Electricité

Lampes et ampoules

Electricity

Lamps – bulbs - connections

**Ref :
283 005**

Français – p 1


English – p 3

Version : 9003

Lampe double filament sur support

Dual filament lamp on support

1 Description

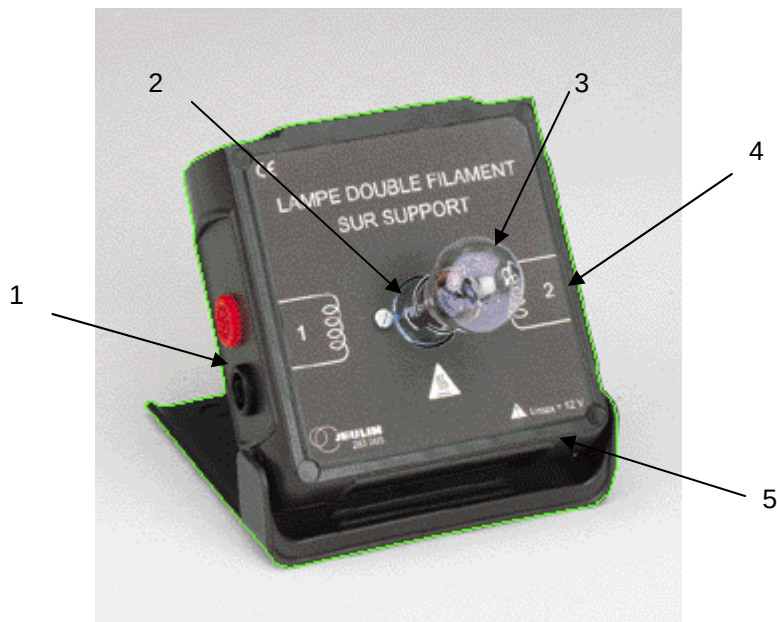

- 1 – Alimentation du filament 1
- 2 – Douille baïonnette
- 3 – Ampoule double filament
- 3 – Alimentation du filament 2
- 4 – Boîtier Initio avec béquille incassable

2 Caractéristiques techniques

- **Ampoule :** 12 V / 18 W – 5 W
- **Tension maxi :** 12 V
- **Entrées :** douilles de sécurité Φ 4 mm
- **Alimentation :** 12 V continu
- **Dimensions :** 100 x 100 x 95 mm
- **Masse :** 170 g
- **Garantie :** 2 ans

Remarque : Les deux filaments de l'ampoule sont montés en parallèle ; les deux douilles noires se trouvent au même potentiel.

Rechange : ampoule double filament 12 V / 18 W – 5 W **réf. 283 006**


3 Service après vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50

1 Description

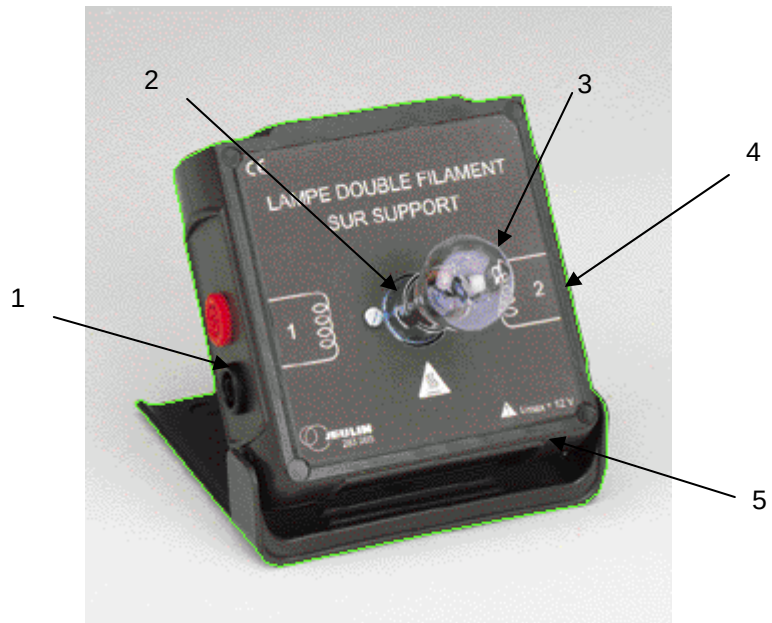

- 1 – Power supply for filament 1
- 2 – Bayonet-type lamp holder
- 3 – Dual filament bulb
- 3 – Power supply to filament 2
- 4 – Initio case with unbreakable support strut

2 Technical characteristics

- **Bulb:** 12 V / 18 W – 5 W
- **Maximum voltage:** 12 V
- **Inputs:** Φ 4 mm safety sockets
- **Power supply:** 12 V DC
- **Dimensions:** 100 x 100 x 95 mm
- **Mass:** 170 g
- **Guarantee:** 2 years

Note: The two filaments of the bulb are installed in parallel; the two black sockets are at the same potential.

Spare: dual filament bulb 12 V / 18 W – 5 W **part no. 283 006**

3 After-Sales Service

This material is under a two year warranty and should be returned to our stores in the event of any defects.

For any repairs, adjustments or spare parts, please contact:

JEULIN - TECHNICAL SUPPORT
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

