

Transmission de l'information

Multiplication - Modulation d'amplitude

Réf :
302 215

Français – p 1

Version : 3109


Démodulateur

1. Objectif du Démodulateur

L'objectif du Démodulateur est de réaliser la démodulation d'amplitude d'un signal.

Il est constitué d'un détecteur de crête et d'un filtre passe-haut.

2. Fonctionnalités

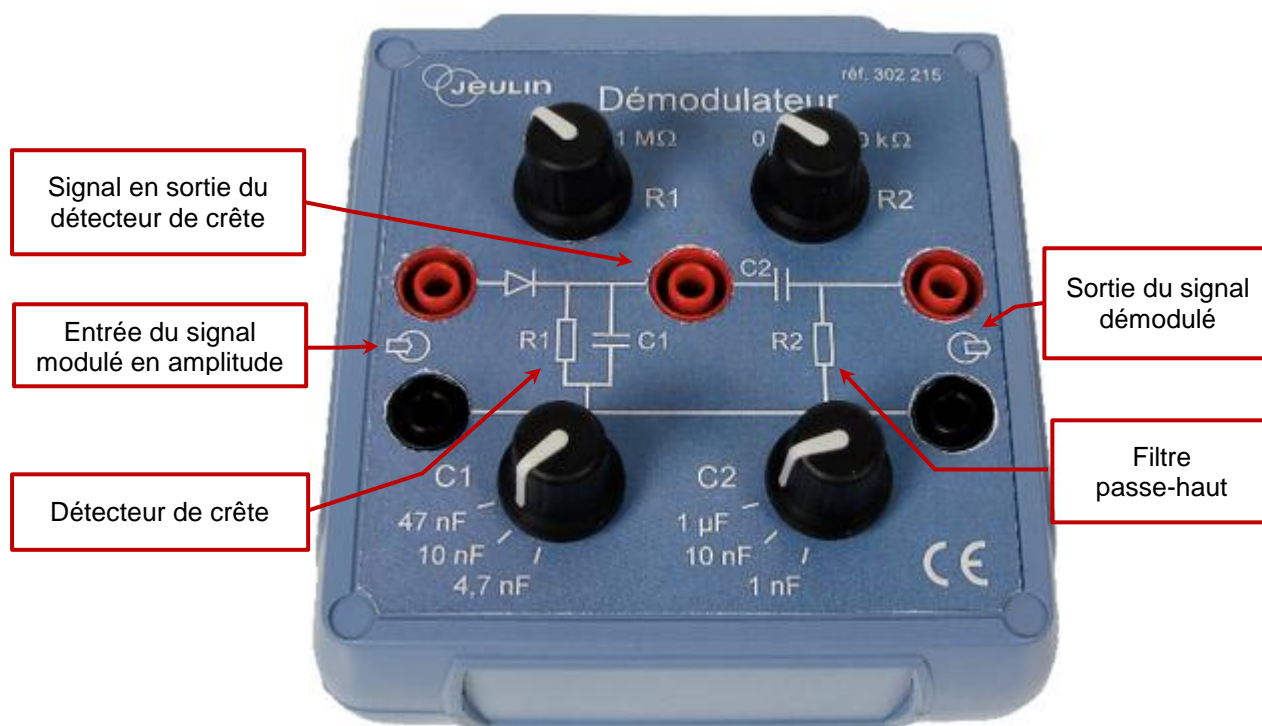

2.1 Caractéristiques techniques

Boîtier Initio®

Dimensions : 100 mm * 100 mm * 40 mm

Entrée et sortie par douilles de sécurité Ø 4 mm

Détecteur de crête :

Choix du condensateur par sélecteur 3 positions (4.7 nF, 10 nF, 47 nF)

Choix de la résistance par potentiomètre (0 à 1 MΩ)

Filtre passe-haut :

Choix du condensateur par sélecteur 3 positions (1 nF, 10 nF, 1 µF)

Choix de la résistance par potentiomètre (0 à 100 MΩ)

3. Service après-vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE

468 rue Jacques Monod

CS 21900

27019 EVREUX CEDEX France

0 825 563 563*

* 0,15 € TTC/min. à partir un téléphone fixe

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge
immédiatement votre appel
pour vous apporter une réponse
adaptée à votre domaine
d'expérimentation :
Sciences de la Vie et de la Terre,
Physique, Chimie, Technologie.

Service gratuit*

0 825 563 563 choix n°3**

* Hors coût d'appel. 0,15 € TTC/min à partir d'un poste fixe.
** Numéro valable uniquement pour la France
métropolitaine et la Corse. Pour les DOM-TOM et les EFE,
composez le +33 2 32 29 40 50.

Aide en ligne
FAQ.jeulin.fr

Direct connection for technical support

A team of experts
at your disposal
from Monday to Friday
(opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request
immediately to provide you
with the right answers regarding
your activity field : Biology, Physics,
Chemistry, Technology.

Free service*

+33 2 32 29 40 50**

* Call cost not included.
** Only for call from foreign countries.



468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
Métropole • Tél : 02 32 29 40 00 - Fax : 02 32 29 43 99 - www.jeulin.fr - support@jeulin.fr
International • Tél : +33 2 32 29 40 23 - Fax : +33 2 32 29 43 24 - www.jeulin.com - export@jeulin.fr
SAS au capital de 1 000 000 € - TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 - Siren 344 652 490 RCS Evreux