



O P T I C S

www.ovio-optics.com

Bancs et cavaliers Prismax™

202233/202234/202235/202237/202502/
202504/202505/202506/202508/202509/
202510/202511/202514/
202518/202519/202520/202521/202523/
202524/202526/204587

Bancs d'optique Prismax™

- Banc prismatique à base équilatérale de 60mm de coté
- Banc en aluminium massif
- Peinture époxy noire
- Points de contacts pourvus de glissières remplaçables
- Graduation tous les mm
- Livré avec pieds avec dispositif de réglage d'horizontalité
- Compatibles avec les principaux cavaliers équilatéraux
- Longueurs : 0.5 m (**202520**), 1 m (**202519**), 1.5 m (**202518**) ou 2 m (**202233**)
- **Pour le montage des pieds, se munir d'un tournevis plat, placer la plaque des pieds perpendiculairement au banc (en dessous de celui-ci) et faire coïncider les trous M4 du banc pour placer les vis et serrer les écrous.**



- Nous proposons également des bancs avec réglet de mesure commençant à -15 cm. Longueurs : 0.5 m (**203328**), 1 m (**203227**), 1.5 m (**203326**) ou 2 m (**204714**)



Cavaliers standards Prismax™

- Structure métallique en aluminium
- Contact mécanique avec le banc pourvu d'un film PTFE
- Verrouillage du cavalier par serrage d'un bouton moleté
- Compatible avec les tiges de diamètre 10 mm
- Pourvu d'une colonne de 90 mm
- Ouverture large pourvue d'un index permettant une précision de repérage de 1 mm
- Disponible en 2 longueurs pour les cavaliers simples :
 - o Longueur : 50 mm (**202234**), masse maximale conseillée : 0,8 kg
 - o Longueur : 100 mm (**202235**), masse maximale conseillée : 3,5 kg
- Cavaliers élémentaires disposant d'un réglage :
 - o Réglage latéral 25 mm (**202696**)
 - Doté de deux glissières en acier inoxydable et d'un vernier micrométrique
 - Précision de lecture/réglage : 0.01 mm
 - Plage de mouvement : 25 ou 50 mm
 - Masse maximale conseillée : 0,3 kg
 - o Réglage latéral 50 mm (**202508**)
 - Doté de deux glissières en acier inoxydable et d'un vernier micrométrique
 - Précision de lecture/réglage : 0.01 mm
 - Plage de mouvement : 25 ou 50 mm




- Masse maximale conseillée : 0,3 kg
- o Réglage vertical 40 mm (**202237**)
 - Système de réglage par pignon/crémaillère
 - Compatible avec tiges de diamètre 10 mm
 - Plage de réglage : 40 mm
 - Hauteur maximale : 130 mm
 - Masse maximale conseillée : 0,6 kg
- o Réglage angulaire (**202514**)
 - Réglage de l'orientation angulaire par bouton moleté
 - Plage de réglage de -20 à +20° (précision de lecture 1°)
 - Diamètre 90 mm
 - Masse maximale conseillée : 0,3 kg



Cavaliers avec réglages spéciaux Prismax™

Cavalier, platine 25 mm Y	202502
Cavalier, platine 25 mm X et 25 mm Y	202504
Cavalier, platine 25 mm X et réglage vert.	202505
Cavalier, platine 25 mm Y et réglage vert.	202506
Cavalier, platine 50 mm Y	202509
Cavalier, platine 50 mm X et 50mm Y	202510
Cavalier, platine 50 mm X et réglage vertical	202511

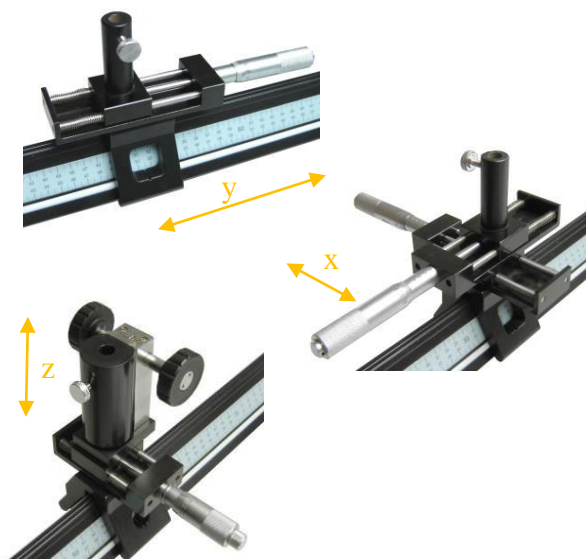

Cavaliers avec serrage multidiamètre Prismax™

- Système de serrage latéral
- Compatible avec tiges de diamètre allant de 8 à 14 mm
- 3 versions :
 - o Cavalier simple multidiamètre (**202524**)
 - o Cavalier long multidiamètre (**202526**)



Accouplements de bancs Prismax™

- Systèmes d'accouplements de bancs
 - o Articulation goniométrique avec graduation tous les degrés sur 180 degrés (90-0-90)
 - **202521** : accouplement seul
 - **204587** : accouplement vendu avec banc 50 cm
 - o Raccordement de 3 bancs, dont 1 orthogonal par rapport aux deux premiers. Au centre, se trouve un porte-tige diamètre 10 mm. (**202523**)



Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.