



O P T I C S


www.ovio-optics.com

Bancs et cavaliers en U

202477/202478/202480/ 202493/202494/202499


Bancs en U de précision

- Bancs en acier époxy noir
- Epaisseur : 3 mm
- Ecartement : 32.5 mm
- Pourvu de graduations au mm sur toute la longueur
- Livré avec 2 pieds larges avec dispositif de réglage d'horizontalité
- Longueur 1,5 m (**202494**) ou 2 m (**202493**)
- **Pour le montage des pieds, se munir d'un tournevis plat, placer la plaque des pieds perpendiculairement au banc (en dessous de celui-ci) et faire coïncider les trous M4 du banc pour placer les vis et serrer les écrous.**

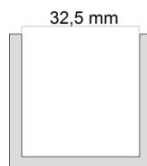

Cavaliers pour banc en U de précision

- Compatible avec les tiges de diamètre 10 mm
- Compatible avec les bancs d'écartement 32 mm
- Cavaliers en laiton
- Hauteur de colonne : 90 mm
- Dispositif de verrouillage oblique
- Modèle colonne simple (**202477**)
- Modèle ajustement latéral fin (**202478**)
 - o Support en aluminium anodisé
 - o Doté de deux glissières en acier inoxydable et d'un vernier micrométrique
 - o Précision de lecture/réglage : 0.01 mm
 - o Plage de mouvement : 25 mm
 - o Poids max. conseillé : 400 g
- Modèle ajustement vertical fin (**202480**)
 - o Système de réglage par pignon/crémaillère
 - o Compatible avec tiges de diamètre 10 mm
 - o Plage de réglage : 40 mm
 - o Hauteur de réglage : 130 mm
 - o Poids max. conseillé : 1 kg
- Modèle serrage multidiamètre (**202499**)
 - o Système de serrage latéral en aluminium anodisé
 - o Compatible avec tiges de diamètre allant de 8 à 14 mm

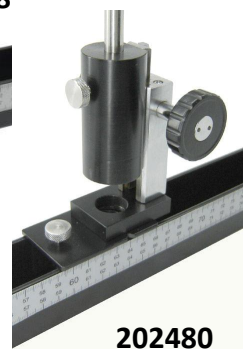

Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.